

Инструкция по лифтинг-тейпированию

Этапы тейпирования лица

- 1 Подготовка к процедуре.**
Очищать кожу нужно гигиеническими средствами и обезжиривать.
- 2 Наклеивание тейпа.**
Необходимо наклеивать тейпы в соответствии с выбранной схемой и носить от 1 до 8 часов. В домашних условиях удобно проводить процедуру на ночь.
- 3 Окончание процедуры.**
Отклеивать тейпы нужно медленно и аккуратно, чтобы не повредить кожу. Иногда удобно тейпы перед снятием намочить. После процедуры нанести питательный крем.

Как приклеить I-тейп:

1. Разорвать бумагу ближе к краю **A**.
2. Аккуратно, не задевая клеевую поверхность, загнуть концы бумаги и приклеить тейп открытым клеевым участком.
3. Отклеить край **A** от бумаги и приклеить его без натяжения.
4. Аккуратно удалить бумагу с части **B** и приклеить тейп с необходимым натяжением.
5. Отделить второй край тейпа от бумаги и приклеить без натяжения.
6. Разтереть тейп на коже.

Тейпирование в косметологии

Тейпирование — процедура, которую используют спортсмены для восстановления после травм, а также для поддержки мышц и связок во время тренировок. Эффективная техника тейпирования стала популярной и в косметологии.

Косметическое тейпирование поможет:

- уменьшить гусиные лапки;
- разгладить складки на лбу и области рта;
- снять отёчность век и участков под глазами;
- подтянуть овал лица;
- уменьшить второй подбородок;
- восстановить кровообращение кожи лица и вернуть ей свежий вид.


Как приклеить W-тейп:

1. Разорвать бумагу ближе к большому краю тейпа.
2. Аккуратно, не задевая клеевую поверхность, загнуть концы бумаги и приклеить тейп открытым клеевым участком.
3. Удалить бумагу с области большого края тейпа и приклеить его без натяжения.
4. Аккуратно удалить бумагу с части **B** первой полоски и приклеить её с необходимым натяжением.
5. Удалить бумагу с части **A** первой полоски тейпа и приклеить её без натяжения.
6. Аналогично приклеить вторую и третью полоски тейпа.
7. Разтереть тейп на коже.

Виды тейпов и их натяжение

В тейпировании KineXib Beauty используются два вида тейпов: прямой **I-тейп** и тейп-осьминожка **W-тейп**.

Тейп в процедуре наклеивается на кожу со своим натяжением. Чтобы узнать силу натяжения, нужно взять один тейп из набора и приложить к образцу.

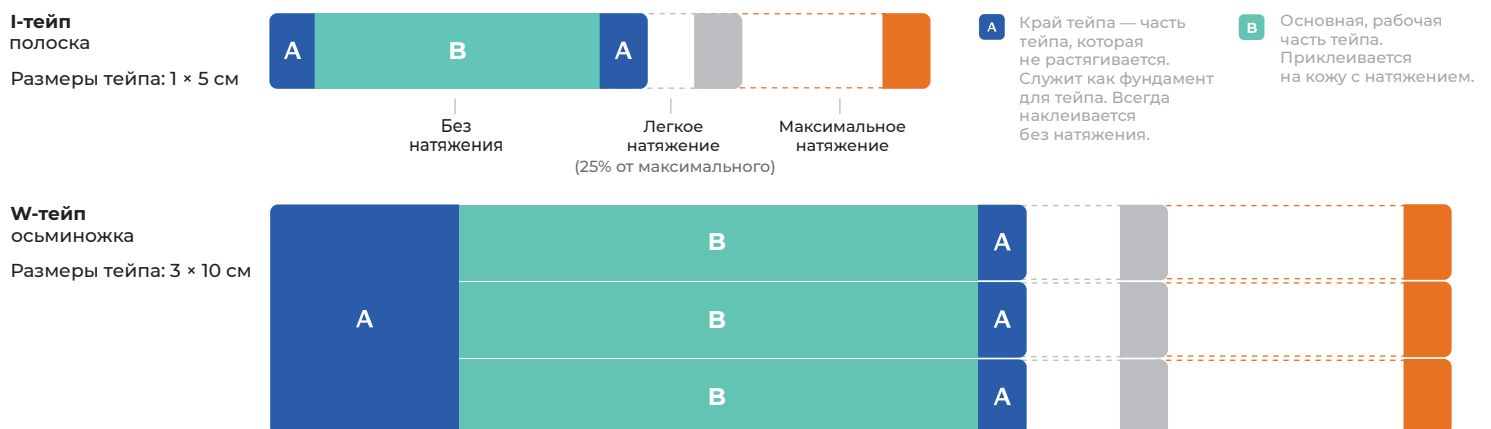

Противопоказания

Местные заболевания и травмы кожи на области тейпирования; индивидуальная непереносимость компонентов сырья; онкологические заболевания и метастазирование.

Присоединяйтесь к нам:

KINEXIB.BEAUTY
 KINEXIB.BEAUTY
 KINEXIB.BEAUTY
 KINEXIB

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Срок годности 3 года. Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Интенсивная программа омоложения лица

Возраст	Лимфодренаж	Биоревитализация	Коррекция морщин	Длительность
20–30	1-й день	2-й день	3-й день	3 дня
30–40	1-й день	2-й день	3–5-й день	5 дней
40–50	1-й день	2-й, 8-й день	3–7-й день	8 дней
50–60	1-й день	2, 8, 9, 10-й день	3–7-й день	10 дней
Старше 60	1-й день	2, 6, 11, 12-й день	3–7-й, 10-й день	10 дней

Лимфодренаж

Это процесс выведения избыточной жидкости. При нарушениях лимфооттока кожа теряет свою эластичность и свежесть. Процедура лимфодренажа нормализует этот процесс. В результате снижаются отёчность, припухлости, формируются чёткие очертания овала лица, и улучшается цвет кожи.

Лифтинг

Цель лифтинг-тейпирования — подтянуть кожу на лице или шее. Для этого используется эластичное свойство тейпа: он тянется туда, откуда приклеивается. Основным механизмом воздействия метода лифтинг-тейпирования состоит в механической коррекции кожи лица.

Биоревитализация

Это процесс обновления кожи. Основным механизмом воздействия данного метода состоит в значительной активации кровотока. За счёт этого происходит активация микроциркуляции, фибробластов и стимуляция синтеза коллагена и эластина.

Область лба



1. Взять 2 W-тейпа.
2. Приклеить большой край тейпа на область околоушных лимфоузлов.
3. Приклеить две полоски тейпа веерообразно к середине лба с лёгким натяжением.
4. Приклеить третью полоску тейпа под глаза к верхней части носа с лёгким натяжением.



Тейп-лифтинг горизонтальных морщин лба:

1. Взять от 2 до 8 I-тейпов.
2. Приклеить край тейпа на лоб под линией волос.
3. Приклеить тейп вертикально со средним натяжением в сторону носа, глаз. Приклеить все остальные тейпы, кроме последнего.
4. Край последнего тейпа приклеить на середину носа. Сам тейп приклеить вертикально с легким натяжением в сторону лба.



1. Взять 2 W-тейпа.
2. Приклеить большой край тейпа на область околоушных лимфоузлов.
3. Приклеить 2 полоски тейпа веерообразно к середине лба без натяжения.
4. Приклеить 3-ю полоску тейпа под глаза к верхней части носа без натяжения.



Тейп-лифтинг вертикальных морщин лба:

1. Взять от 2 до 6 I-тейпов.
2. Приклеить край тейпа на лоб около виска.
3. Основную часть тейпа приклеить горизонтально с легким натяжением в сторону центра лица.
4. Приклеить 1 - 2 тейпа рядом. Остальные — с другой стороны лица.

Область губ



1. Взять 4 W-тейпа.
2. Приклеить большой край первого тейпа на область околоушных лимфоузлов.
3. Приклеить полоски тейпа веерообразно в сторону рта с лёгким натяжением.
4. Приклеить большой край второго тейпа на область подчелюстных лимфоузлов.
5. Приклеить полоски тейпа веерообразно в сторону рта и носа с лёгким натяжением.



1. Взять 4 I-тейпа.
2. Приклеить край тейпа перед ухом.
3. Приклеить основную часть тейпа с лёгким натяжением в сторону, перпендикулярно носогубной складке.

Не приклеивать тейп непосредственно на носогубную складку.



1. Взять 4 W-тейпа.
2. Приклеить большой край первого тейпа на область околоушных лимфоузлов.
3. Приклеить полоски тейпа веерообразно в сторону рта без натяжения.
4. Приклеить большой край второго тейпа на область подчелюстных лимфоузлов.
5. Приклеить полоски тейпа веерообразно в сторону рта и носа без натяжения.

Область глаз



1. Взять 2 W-тейпа.
2. Приклеить большой край тейпа на область околоушных лимфоузлов.
3. Приклеить первую полоску тейпа к середине лба с лёгким натяжением.
4. Приклеить вторую полоску тейпа к углу глаза с лёгким натяжением. Лишнее отрезать.
5. Приклеить третью полоску тейпа под глаза к верхней части носа с лёгким натяжением.



1. Взять 4 I-тейпа.
2. Приклеить край тейпа на верхнюю часть виска.
3. Приклеить основную часть тейпа вертикально с лёгким натяжением вниз.
4. Приклеить край второго тейпа на область скулы.
5. Приклеить основную часть тейпа вертикально с лёгким натяжением вверх в сторону морщины.

Не приклеивать тейп непосредственно на морщины.



1. Взять 2 W-тейпа.
2. Приклеить большой край тейпа на область околоушных лимфоузлов.
3. Приклеить первую полоску тейпа к середине лба без натяжения.
4. Приклеить вторую полоску тейпа к углу глаза без натяжения. Лишнее отрезать.
5. Приклеить третью полоску тейпа под глаза к верхней части носа без натяжения.

Область шеи



1. Взять 2 W-тейпа.
2. Приклеить большой край тейпа на область надключичных лимфоузлов.
3. Приклеить полоски тейпа веерообразно к челюсти с лёгким натяжением.



1. Взять от 2 до 4 I-тейпов.
2. Приклеить край тейпа под углом к нижней челюсти.
3. Приклеить основную часть тейпа с легким натяжением в сторону подбородка.



1. Взять 2 W-тейпа.
2. Приклеить большой край тейпа на область надключичных лимфоузлов.
3. Приклеить полоски тейпа веерообразно к челюсти без натяжения.